

# リアルタイムPCR

# 発売記念

# スペシャルキャンペーン!


**NEW**

希望小売価格（税抜）


~~¥2,850,000~~

**キャンペーン特別価格（税抜）**

# ¥1,980,000

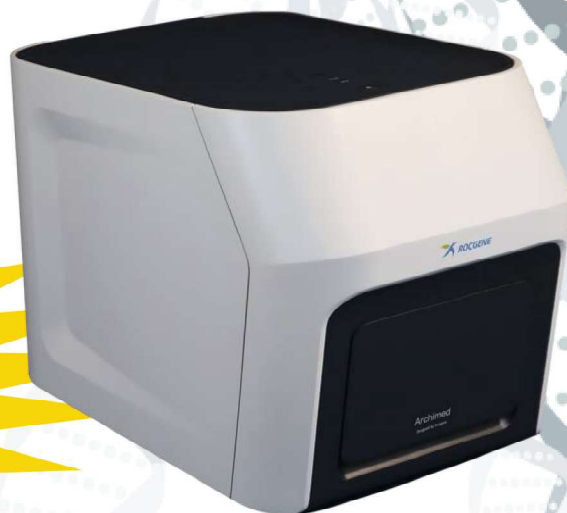
**30% off**


## 96well 蛍光4色測定! リアルタイムPCR Archimed R4

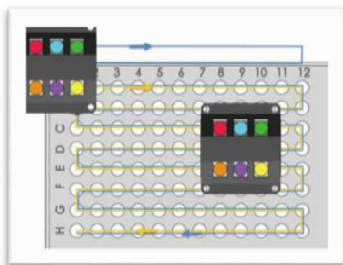


### 優れた光学系

一般的なPDやCCDよりも高感度な検出器MPPCを使用。  
各蛍光フィルターが物理的に離れているため、ウェル間クロストークを抑制。

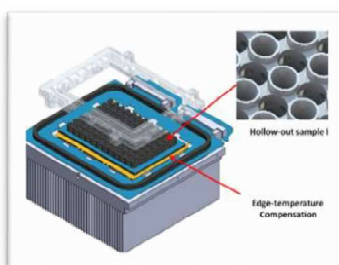

### 迅速で安定した温度制御

独自形状の金属製ホローブロックによる迅速な温度変化。  
熱伝導性カーボンフィルムと補助加熱プレートによるエッジ温度補正機能で高い温度均一性を実現。

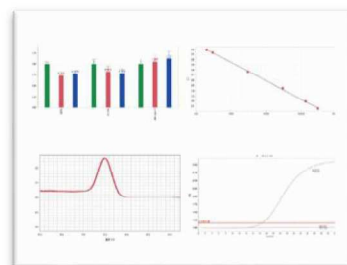

### 豊富なアプリケーション

絶対定量や相対定量だけでなく、標準ソフトでHRM解析やThermal Shift Assay解析が利用可能。

## キャンペーン期間

2025年 **9/1**

2026年 **1/31**

\*制御用PCは付属しておりません。

\*こちらのキャンペーンは予告なく終了する可能性があります。

\*価格、仕様は予告なく変更となる場合があります。

|               |                              |            |  |
|---------------|------------------------------|------------|--|
| 製品名           | Archimed R4                  |            |  |
| ブロックウェル数      | 96 well                      |            |  |
| 蛍光            | 4 色                          |            |  |
| 励起波長/検出波長     | 455-650 nm/510-715 nm        |            |  |
| 検出器           | 高感度シリコンフォトマルチサプライヤ (MPPC)    |            |  |
| 検出可能蛍光色素      | F1:FAM/SYBR® Green I         | F2:VIC/HEX |  |
|               | F3:ROX                       | F4:Cy5/LIZ |  |
| 温度ランプ (最大、平均) | ≧6.0℃/秒、≧4℃/秒 (変更可能)         |            |  |
| 温度均一性         | ≦± 0.1℃                      |            |  |
| 重さ            | 25 kg                        |            |  |
| 大きさ (L×W×H)   | 52 × 35 × 37 cm              |            |  |
| 電源            | 100-240 VAC, 50-60 Hz, 750 W |            |  |

\*PCは別売りとなります。

\*価格と仕様は予告なく変更になる場合があります。

## リアルタイムPCR試薬には Agilent社 BrilliantⅢ がオススメ！



詳細はコチラ！



- ・ 改良された高速ホットスタートが反応時間を減らし

Brilliant III Ultra-Fast SYBR® QPCR MasterMix

### ■ SYBR® Green I 検出用

| 製品タイプ         | 品番         | 型番     | 定価       |
|---------------|------------|--------|----------|
| 通常タイプ         | 89-7107-26 | 600882 | ¥19,000  |
| 1-step RT-PCR | 89-7107-32 | 600886 | ¥138,000 |

Brilliant III Ultra-Fast QPCR MasterMix

### ■ プローブ検出用

| 製品タイプ         | 品番         | 型番     | 定価       |
|---------------|------------|--------|----------|
| 通常タイプ         | 89-7107-43 | 600880 | ¥36,000  |
| 1-step RT-PCR | 89-7107-49 | 600884 | ¥121,000 |

■ 価格表に記載の価格は全て税抜価格です

■ その他Low・High ROXタイプやまとめ買いセットなど取り揃えておりますので、お気軽にお問い合わせください